

UNIDAD DE 15 LTS PORTATIL

Compresor de gran potencia gracias a su diseño, con un motor de 1 hp libre de aceite, proporcionando un potencial. Con funcionamiento 127v 60Hz. Con depósito de 15 litros y un caudal de hasta 150 litros/minuto. Carga completa del depósito en menos de 5 minutos. Especialmente indicado para uso dental. Trabajo pesado.




Características generales:

- Manómetro de presión en depósito.
- Llave de paso 1/4" hembra.
- Depósito de 15 litros con purgador manual.
- Motores con protección de temperatura y soportes anti vibración.
- Presostato con rango de funcionamiento entre 5 y 8 Bar.
- Conexión a la red con enchufe.
- Eyector de saliva.
- Conector de alta/baja.
- Jeringa triple.
- Sistema fluchs.
- Charola de plástico
- Rodajas para fácil manejo
- OPCIONAL ESCUPIDERA PORTATIL

								
100% Libre de aceite	150 litros / minuto	127V. 50/60Hz	100w 1HP	100 lbs	62 dB	15 litros	30Kg.	(L)66cm (An)34cm (A)70cm



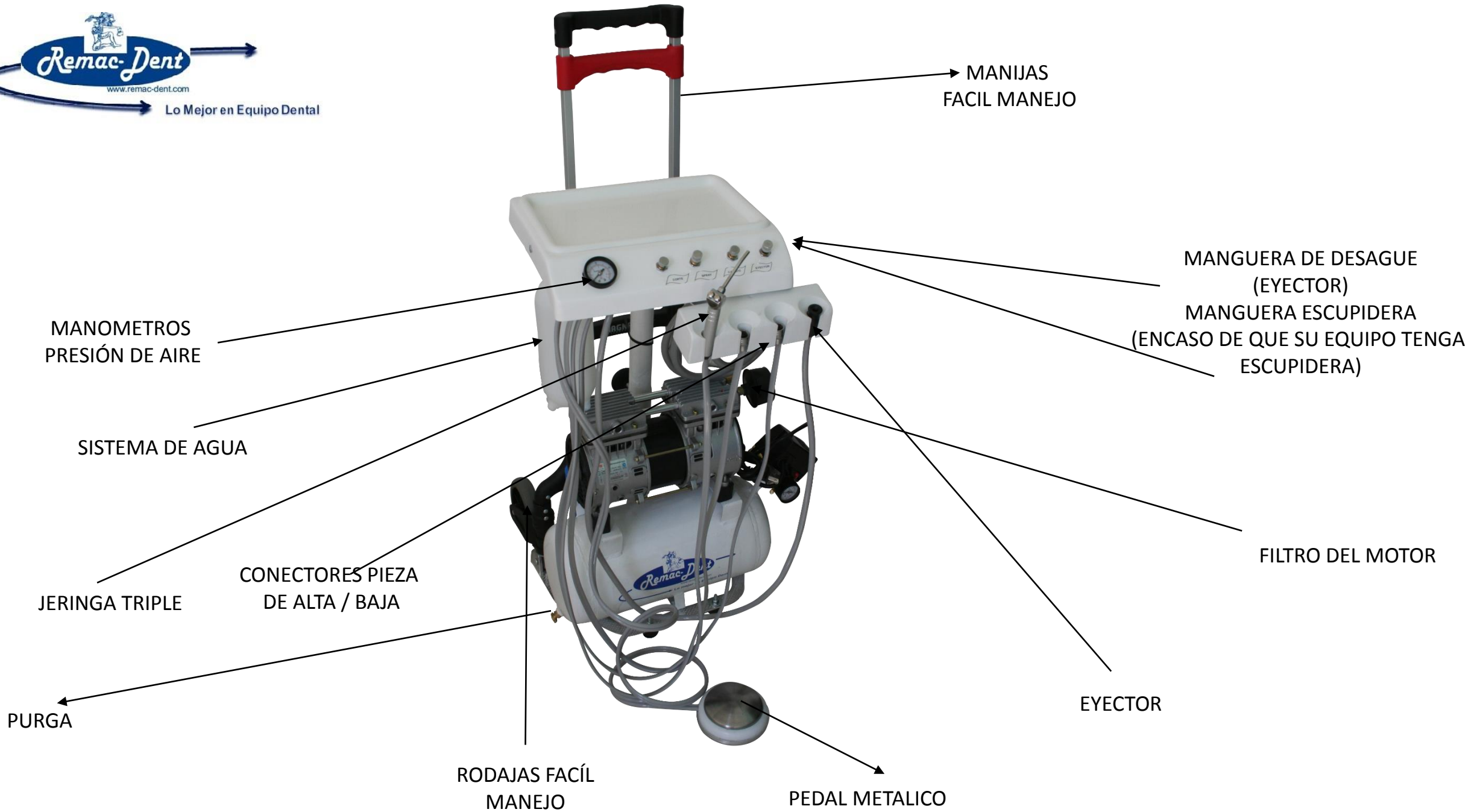



EYECTOR:

GIRE SU PERILLA PARA UTILIZAR EL EYECTOR.

LLAVE DE CAMBIO:

ARRIBA INDICA CONECTOR DE ALTA,
ABAJO INDICA CONECTOR DE BAJA.

LLAVE DE SPRAY:

GIRE SU PERILLA PARA REGULAR LA CANTIDAD
DE AGUA QUE NECESITA EN SU CONECTOR ALTA.

LLAVE DE CORTE:

NOS SIRVE PARA QUE TENGA PRESIÓN
LA BOTELLA DE AGUA.

LLAVE DE ESCUPIDERA:

GIRE SU PERILLA PARA SUCCIONE LA SALIVA.
(SOLO PARA EQUIPOS CON ESCUPIDERA)

REGULADOR FLUSH:

SIRVE PARA DARLE PRECION A LA BOTELLA.

PEDAL:

CUANDO UTILISE SU ALTA/BAJA PISE EL PEDAL



1. ANTES DE UTILIZAR SU EQUIPO, VERIFIQUE QUE ESTE EN BUENAS CONDICIONES.
2. VERIFIQUE SU VOLTAJE 127V 50/60 Hz.
3. CONECTE SU COMPRESOR A UN TOMA CORRIENTE.
4. DEJE QUE SU COMPRESOR TRABAJE, TIEMPO DE LLENADO APROXIMADAMENTE 3 MINUTOS.
5. LLENE SU BOTELLA DE AGUA.
6. COLOQUE SU BOTELLA.
7. ACTIVE SU LLAVE DE CORTE PARA TENGA PRESIÓN.
8. UTILICE SU JERINGA PARA VERIFICAR QUE SI HAY PRESIÓN DE AGUA Y AIRE.
9. PISE SU PEDAL Y IDENTIFIQUE QUE CONECTOR VA UTILIZAR.
10. AL PRECIONAR EL PEDAL, EL MANOMETRO DEL SISTEMA DEBE INDICAR 30LBS
11. NUNCA quite su filtro del motor puede ocasionar que se queme.
12. PURGUE SU COMPRESOR CADA 3 MESES FIG. 2

PRECAUCION:

**NUNCA DESCONECTE SU COMPRESOR DE LA CLAVIJA
SIEMPRE APAGUELO DE LA PALANCA DEL AUTOMATICO**

MANOMETRO PRECION DEL
SISTEMA, CAPASIDAD MAXIMA
30 LIBRAS.

MANOMETRO PRECION DEL
TANQUE, CAPASIDAD MAXIMA
100 LIBRAS.



**POLIZA DE GARANTIA
PARA EQUIPOS PORTATILES QUE TRABAJAN CON ACEITE**

MALETIN, ROBOTIN

MARCA: _____

FACTURA No: _____

No. DE SERIE: _____

FECHA DE COMPRA: _____

REMAC-DENT. Garantiza este producto por el período de 6 MESES, contra defectos de fabricación y materiales, a p a r t i r d e l a fecha de compra.

CONDICIONES

•Para hacer efectiva esta garantía es suficiente con presentar el producto junto con el comprobante de compra en el lugar donde fue adquirido o dirigirse a:

CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIO:

REMAC-DENT

FABRICA: CALLE PERLA MZ 1 LT 18 COL JOYAS DE EATEPEC ESTADO DE MEXICO

SUCURSAL: CALZADA DE TLALPAN 974 COL NATIVITAS MEXICO DF.

TEL. 015526195566 / 015515622012 / 015515622217 www.remac-dent.com remacdent@yahoo.com.mx

La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto así como las partes defectuosas sin ningún cargo al consumidor.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICA

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las indicadas en el instructivo.
- Si el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por REMAC-DENT.
- Cuando no se ha instalado de acuerdo al instructivo.
- La empresa no se hace responsable por daños causados directa o indirectamente por la instalación de este producto.
- Producto maltratado, roto, golpeado por manejo irresponsable o descuido.
- No aplica en partes eléctricas como motores
- Por variaciones de voltaje.

NOTA: EN CASO DE QUE ESTA PÓLIZA SE EXTRAVIARA, EL CONSUMIDOR PUEDE RECURRIR A SU PROVEEDOR PARA QUE LE EXPIDA OTRA, PREVIA PRESENTACIÓN DEL COMPROBANTE DE COMPRA